

Kom i gang med Q-interactive

Q-interactive Startvejledning




Her er instruktionerne til installation af Q-interactive Assess Appen, etablering af de korrekte indstillinger på begge iPad-enheder, færdiggøring af dine loginoplysninger og for at oprette en øvetest. Vi anbefaler at øve testen et par gange, før du tester med rigtige klienter.

AFSNIT 1: Download appen


Q-interactive Assess Appen skal downloades på begge iPads for at kunne bruge systemet.

TRIN 1

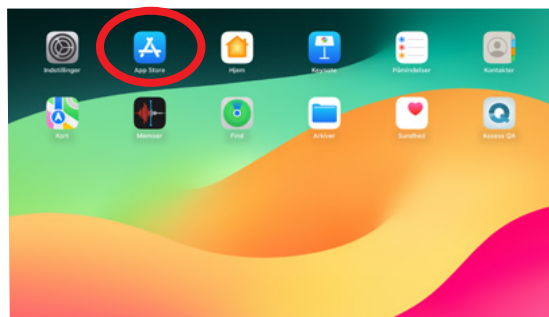

Åbn App Store på startskærmen på din iPad.

TRIN 2

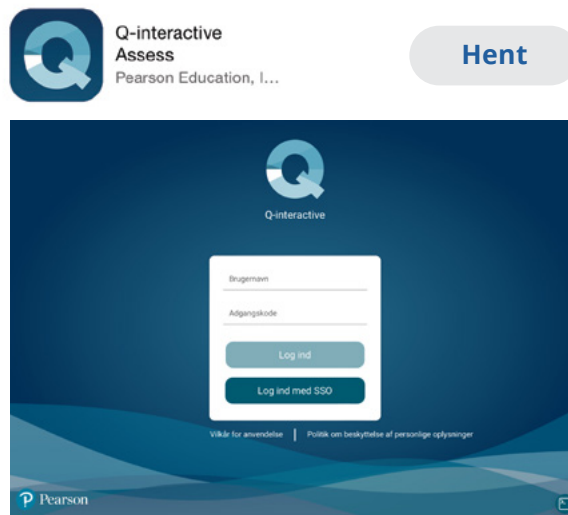

Søg efter Q-interactive, og klik på "Hent".

AFSNIT 2: Konfigurer iPads

Når Assess er downloadet, kan du konfigurere indstillingerne på begge enheder. Dette er et vigtigt trin af flere årsager:

- Sørg for, at iPads parres korrekt for at kunne indsamle data fra hinanden.
- Stimuli vises på en standardiseret måde.
- Hjælpe med at få Q-interactive til at fungere problemfrit.
- Eliminere forstyrrelser, som kan opstå under testningen.

TRIN 1



Tryk på appen Indstillinger på startskærmen.

TRIN 2

Juster dine iPads i henhold til følgende tabel. Q-interactive Assess bruger Wi-Fi til at forbinde testlederens samt testpersonens enhed. Du skal være forbundet til et aktivt Wi-Fi-netværk for at downloade og synkronisere tests. Du behøver ikke at være forbundet til et aktivt Wi-Fi-netværk for at administrere testene, men du skal have Wi-Fi aktiveret på begge enheder.

Testleders iPad	Testpersons iPad	Indstilling	Funktion	Alternativ
•	•	Wi-Fi	Slå til	Vælg netværk
•	•	Generelt	Tastatur	Slå fra "Automatisk store bogstaver"
•	•	Generelt	Tastatur	Slå fra "Automatisk rettelser"
	•	Skærm og lysstyrke	Lysstyrke	Fuld lysstyrke/ Skub indstillingen helt til højre
	•	Skærm og lysstyrke	Night Shift	Slå fra
	•	Skærm og lysstyrke	True Tone	Slå fra
•	•	Skærm og lysstyrke	Automatisk lås	15 minutter
	•	Tilgængelighed	Skærm og tekststørrelse	Slå fra "Automatisk lysstyrke"

AFSNIT 3: Oprettelse af en øvetest

Din velkomstmil sætter det hele i gang ved først at etablere dine loginoplysninger. Hvis du allerede har Q-interactive, har du ikke brug for at modtage en velkomstmil. Du kan fortsat bruge dine eksisterende loginoplysninger også med den nye Assess-app.

TRIN 1



Linket "Indstil din adgangskode, og log ind" åbner skærmen, hvor du kan oprette din Q-interactive adgangskode.

Når du har indsendt adgangskoden og accepteret vilkår og betingelser for Q-interactive, er du nu klar til at oprette en øvetest.

TRIN 2




Fra fanen Kontrolpanel skal du klikke på knappen Øvetest og derefter klikke på Opret øvetestperson. Efter at have tastet oplysningerne på øvetestpersonen ind vælg Gem øvetestperson.

TRIN 3




Vælg batteri ved at klikke på knappen Tilføj ud for WISC-V, og klik derefter på knappen Næste.

TRIN 4

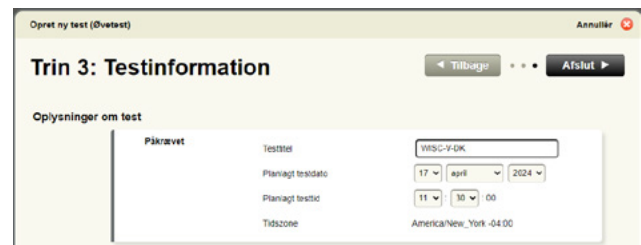

Indstil dato og klokkeslæt for testdato, og klik på knappen Afslut.


TRIN 5

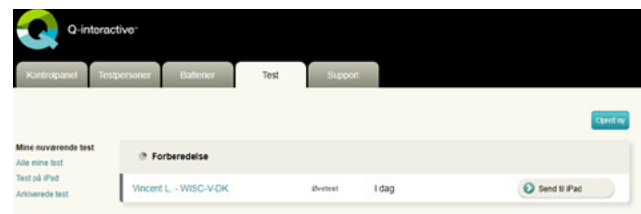

Klik på knappen Send til iPad, og så er du klar til at logge ind på iPads! Log ind på begge iPads med de samme loginoplysninger, der blev oprettet tidligere, for at starte testen.


TRIN 6

For at starte testen skal du logge ind på begge iPads med de samme loginoplysninger, som du valgte tidligere.

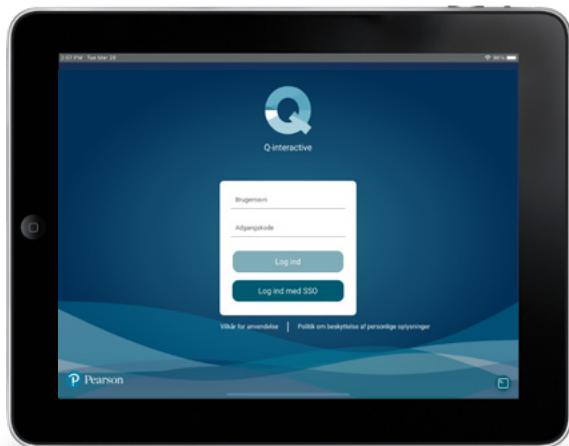**TRIN 7**

Indtast dit brugernavn og din adgangskode. Tillad 10-20 minutter før dit komplette bibliotek af tests er downloadet.

Dine iPads vil forbinde, når du starter din test, og hvis begge iPads er blevet konfigureret korrekt.

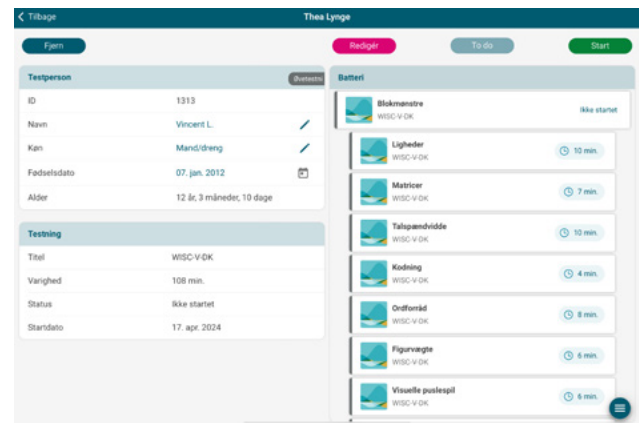TRIN 8

Tryk på knappen Start for at begynde testen.
Øvetestsessioner har alle de samme funktioner som rigtige testsessioner, bortset fra at alle scores er nul.

Tillykke! Du er nu klar til at bruge Q-interactive!

78 72 35 50 | Pearsonclinical.dk

Copyright © 2023 Pearson Education, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Pearson and Q-interactive are trademarks, in the US and/or other countries, of Pearson plc.